

BioPlus 600/660W

GRAM

Biostorage you can depend on



BioPlus 660W.
Lades en glasdeur als optie mogelijk.

De **BioPlus 600/660W** serie is uitermate geschikt voor het bewaren van temperatuurgevoelige producten, waarbij iedere temperatuurschommeling grote invloed kan hebben op de producten.

BioPlus koelkasten (ER) geven u de mogelijkheid de relatieve luchtvochtigheid te verlagen om de houdbaarheid van de opgeslagen producten te verlengen.


De Gram BioPlus meubelen zijn er op voorbereid om ook onder zware omstandigheden goed te presteren.

Gram past milieuvriendelijke – HFC vrij – isolatie (cyclopentaan) toe en is verkrijgbaar met halogeenvrij (natuurlijk) koudemiddel of HFC-koudemiddel.

De meubelen zijn ook leverbaar zonder compressor voor separate aansluiting of op een centraal systeem.



De BioPlus 600/660W is verkrijgbaar als koelkast of vrieskast in het wit of in roestvaststaal. Keuzemogelijkheid in glasdeur (alleen bij koeling) of dichte deur.

 II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc

Biostorage
you can
depend on

Versie 05. Geldig vanaf 01.01.23



BioPlus 600/660W



Biostorage you can depend on

Unieke Gram BioLine besturing

De elektronische besturing is standaard met o.a.: Potentiaalvrij contact voor externe alarmering (2-polig) Instelbaar akoestisch en optisch alarm (deur- temperatuur- en sensoralarm) en opslag alarm historie. Producttemperatuur-weergave in display (naar keuze). Toetsenblokkering. Kalibratie mogelijkheid sensoren. Foutdiagnose- en serviceprogramma.



Doorvoer opening

24,5 mm doorvoer opening om eenvoudig externe voelers te plaatsen.



E-sensor

Extra sensor voor weergave van de producttemperatuur.



Roosters en lades

Een uitgebreide keuze in lades, schappen en roosters maakt het mogelijk het interieur naar wens in te delen. PS.: Indeling tegen meerprijs, kasten zijn standaard leeg.




Poten of wielen

Inwendig roestvaststaal

Inwendig geheel uit roestvaststaal. Roosterdragers en ladegeleiders als ook de staanders zijn volledig roestvaststaal.

ATEX

Alle BioPlus modellen voldoen aan ATEX Cat.3 Zone 2 vereisten, zowel intern als extern, en zijn dus geschikt voor plaatsing in een mogelijk explosieve atmosfeer.

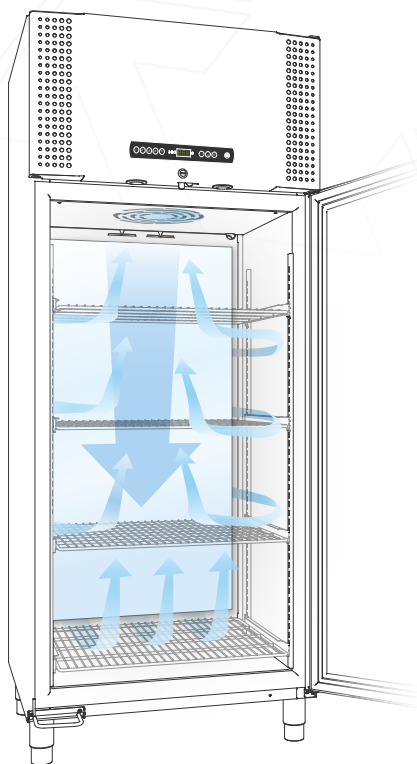

LUCHTGELEIDING

Het unieke Gram BioLine luchtgeleidingssysteem garandeert gelijkmatige koeling in de kast met een zeer laag energieverbruik.

Technische gegevens	BioPlus ER600/660W	BioPlus RF 600/660W
Temperatuurbereik	-2/+20 °C	-25/-5 °C
Omgevingstemperatuur	Dichte deur +10/+43 °C; glasdeur (ER) +10/+38 °C	
Besturing	Gram BioLine MPC 4.6, potentiaalvrij-contact, E-sensor, akoestisch deuren temperatuur alarm - afzonderlijk instelbaar, alarm historie, droge werking (ER) en offsetmogelijkheid van de ruimte- en E-sensor.	
Inwendig	Roestvaststaal	
Uitwendig	Wit gelakt of roestvaststaal	
Afmetingen mm (B x D x H)	600 W: 815 x 756 x 1875/2125 660W: 815 x 756 x 2025/2275	
Bruto inhoud	600 W: 600 liter/660W: 660 liter	
Netto inhoud	600 W: 432 liter/660W: 484 liter	
Netto gewicht	Onverpakt netto gewicht zonder optioneel interieur: 600: 146 kg/660: 152 kg	
Maximaal aantal roosters en lades	600 W: 24 roosters of 12 lades 660W: 27 roosters of 13 lades	
Isolatie	60 mm HFC vrij cyclopenthaan	
K-waarde	Glasdeur 0.49/0.49 W/m²K	Dichte deur 0.31/0.31 W/m²K
Koudemiddel	R290	
Co ₂ e		
Koelcapaciteit bij -10 °C	R290 389 Watt	
Koelcapaciteit bij -25 °C		R290 512 Watt
Energieverbruik	1.35 kWh/24h/1.28 kWh/24h	4.07 kWh/24h/ 4.46 kWh/24h
Geplaatst op	Poten*	
Aansluiting	230 V, 50 Hz	
Geluidsniveau	44.8 dB(A) / 44.8 dB(A)	45.8 dB(A) / 49.3 dB(A)
Luchtgeleiding	Gram Luchtgeleidingssysteem	
Ontdooiing	Smart defrost met automatische ontdooiing en herverdamping dooiwater	

* Ook verkrijgbaar met wielset of geschikt voor plaatsing op bouwkundige sokkel, zonder meerprijs.

